

女性にAEDを使うのを ためらわないで!!

服をすべて脱がさなくても、AED は使用できます!

パッドを

素肌に直接貼り付ける

ことができているば、**ブラジャー**

を外す必要はありません。


服の下で下着をずらして、

右の鎖骨の下と

左のわき腹のあたりに

貼ることで対応できます。

AEDのパッドに描かれている
イラストをご参照ください。

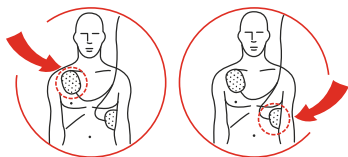

金属製品 (ブラジャーのワイヤー部分、ネックレス等) は**パッドに触れさせない**ようにしてください。

パッドに触れていなければ、ネックレスは無理に取り外す必要はありません。

パッドを貼った後に、上から上着やタオルなどをかけても大丈夫です

その他の注意事項

- * 汗などで胸が濡れている場合は、水分を拭き取ってください。
- * 電極パッドを貼る部分に貼り薬 (湿布等) が貼られている場合は、貼り薬を剥がしてください。
- * ペースメーカー等が植え込まれている場合 (胸に硬いこぶのようなでっぱりが見える) は、このでっぱりを避けて電極パッドを貼ってください。
- * 車内など、揺れている場所では使用しないでください。

**重要なことは
電気ショックの時間を
遅らせないことです**

電気ショックが1分遅れるごとに
救命率は10%ずつ低下します

**完璧でなくても構わないので、命を助けるために、
勇気を持って一步を踏み出してください**



東京都多摩府中保健所

〒183-0022 東京都府中市宮西町一丁目 26 番地の 1 東京都府中合同庁舎内
電話: 042-362-2334 (代) FAX: 042-360-2144

【監修】公益財団法人 日本AED財団

【問合せ先】

静岡市 保健衛生医療課
電話: 054-221-1332